



AFTER CARE

QUELQUES CONSEILS




CUIR CHEVELU

L'aspect le plus important sur lequel repose l'entretien de Biofibre® est une bonne hygiène personnelle et **un bon entretien post-implantation**.



Biofibre® Hair Care Set a été conçu pour un bon entretien post-implantation. Il contient les produits les plus adaptés pour l'hygiène et l'entretien de Biofibre®:

BIOFIBRE® Hair Comfort pour nettoyer le cuir chevelu,
BIOFIBRE® DermaClean pour l'hygiène du cuir chevelu
BIOFIBRE® SeboCare pour la prévention des bouchons de sébum.

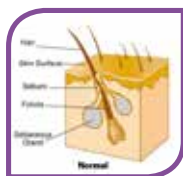

La surface du cuir chevelu humain (épiderme) se caractérise par une circulation sanguine élevée et la production d'une substance huileuse appelée "sébum". Il s'agit d'une barrière naturelle utile, mais si elle est produite en excès, elle doit être nettoyée. La règle principale pour un bon entretien du cuir chevelu est l'élimination de l'excès de sébum et de sueur.



PREMIER JOUR APRÈS L'IMPLANTATION



Éviter de vous laver et de vous peigner les cheveux. Si vous portez un chapeau ou un bonnet, protéger la zone implantée avec de la gaze stérile. Ne pas utiliser de microfibres de kératine.



Il est conseillé de suivre l'antibiothérapie (systémique et locale) et de prendre de la cétirizine au besoin, tel que prescrit par la clinique.



En fonction du nombre de cheveux implantés, une rougeur du cuir chevelu peut apparaître. Pour éliminer ce phénomène transitoire, utiliser un sac de glace sur la zone concernée, en protégeant la zone de contact avec de la gaze stérile. L'application peut être répétée deux fois par jour pendant 5 minutes.



Ne pas utiliser d'autres produits ou d'autres traitements que ceux recommandés par la clinique d'implantologie.



PREMIÈRE SEMAINE APRÈS L'IMPLANTATION



Au 3ème jour, utiliser un shampooin à base de kétoconazole. Au 6ème jour, utiliser **BIOFIBRE® Hair Comfort**.



Manipuler les cheveux avec des mouvements délicats car une traction excessive des cheveux implantés augmente le risque de chute.



Pour la nuit, il est recommandé d'utiliser un oreiller moelleux et une taie d'oreiller propre pour éviter de tirer involontairement sur les cheveux.



Pour peigner les cheveux Biofibre®, utiliser un peigne à dents larges, préalablement désinfecté. Si nécessaire, avant de peigner les cheveux, maintenir les longueurs dans votre main et démêler les nœuds.



Eviter l'exposition excessive au soleil de la zone implantée et tout contact avec des endroits poussiéreux ou sales (y compris la plage).

Ne pas utiliser de bonnet ou de chapeau sans avoir protégé la zone implantée avec de la gaze stérile. Ne pas utiliser de casque. Ne pas utiliser Toppik ou des autres microfibres de kératine.



Il est conseillé de suivre l'antibiothérapie (systémique et locale) et de prendre de la cétrizine au besoin, tel que prescrit par la clinique.



Ne pas utiliser d'autres produits ou d'autres traitements que ceux recommandés par la clinique d'implantologie.



PREMIER MOIS APRES L'IMPLANTATION



A partir de la 2ème semaine après implantation, utiliser **BIOFIBRE® Hair Comfort** tous les 2 ou 3 jours. Utiliser un shampooin à base de kétoconazole une fois par semaine.



Il est conseillé de compléter la thérapie locale et les soins du cuir chevelu en utilisant **BIOFIBRE® DermaClean** tel que prescrit par la clinique d'implantation.



Pendant le premier mois, éviter ou réduire les boissons alcoolisées, l'usage du tabac, l'effort physique et la relative transpiration, le sauna ou le solarium, les baignades à la mer ou à la piscine. Cela permettra d'accélérer le processus de guérison après l'implantation.



Manipuler les cheveux avec des mouvements délicats car une traction excessive des cheveux implantés augmente le risque de chute.



Ne pas utiliser d'autres produits ou d'autres traitements que ceux recommandés par la clinique d'implantologie.



Eviter l'exposition excessive au soleil de la zone implantée et tout contact avec des endroits poussiéreux ou sales (y compris la plage). Ne pas utiliser de bonnet ou de chapeau sans avoir protégé la zone implantée avec de la gaze stérile. Ne pas utiliser de casque. Ne pas utiliser Toppik ou des autres microfibres de kératine.

REGULAR FOLLOW-UP

SUIVI POST-IMPLANTATION APRES LE PREMIER MOIS



Un contrôle médical auprès de la clinique d'implantation est recommandé pour établir un programme personnalisé de suivi post-implantation. Cela permettra de maximiser la durée et les résultats esthétiques obtenus avec l'implantation.



Ne pas utiliser d'autres produits ou d'autres traitements que ceux recommandés par la clinique d'implantologie.



Utiliser **BIOFIBRE® Hair Comfort** tous les jours ou tous les 2 jours.



Ne pas oublier que votre clinique d'implantologie est disponible pour vous fournir toutes les informations que vous souhaitez. Nous vous invitons à saisir cette opportunité pour optimiser le résultat obtenu.



Utiliser un shampoing à base de kétoconazole (type Nizoral) de 1 à 4 fois par mois (selon ce que la clinique propose).



Vaporiser **BIOFIBRE® DermaClean** sur la zone implantée 3 à 4 fois par semaine à partir de la 3ème semaine.



Vaporiser **BIOFIBRE® SeboCare** sur la zone implantée 3 fois par semaine à partir de la 5ème semaine, afin d'éviter la formation d'accumulations de sébum.



Au cours des prochains mois, une petite accumulation de sébum peut apparaître autour des cheveux implantés. Il est donc nécessaire d'éliminer l'excès de sébum et les petits bouchons de sébum (comédons) qui pourraient se former.



CONSEILS À RETENIR



1. SOYEZ NATUREL

Traiter les cheveux Biofibre® naturellement et jamais de manière agressive afin d'obtenir un bénéfice esthétique maximal et une durée maximale.



2. NE PAS SE GRATTER

Ne pas se gratter, ni toucher pas la zone implantée avec des mains non-lavées. Si nécessaire, un peigne à dents larges désinfecté avec **BIOFIBRE® DermaClean** peut être utilisé.



3. SE PEIGNER

Peigner doucement en suivant le sens des cheveux implantés. Le peigne (de préférence en bois, afin de réduire la charge électrostatique) doit être nettoyé et désinfecté avec **BIOFIBRE® DermaClean**.



4. COUSSIN

L'importance d'utiliser un oreiller moelleux avec une taie d'oreiller propre ne doit pas être sous-estimée, en particulier si la zone d'implantation est étendue. Les oreillers avec une taie en satin ou en soie garantissent un frottement minimal et permettent une durabilité maximale de votre implant capillaire Biofibre®.



5. SUEUR

Un climat chaud et l'exercice physique augmentent la transpiration. Pour éliminer la transpiration excessive du cuir chevelu, il est recommandé de rincer à l'eau froide dès que possible.



6. SHAMPOOING

Effectuer des mouvements très doux lors du shampooing, pour minimiser les frottements et les risques de chute des fibres implantées. Nous vous conseillons d'utiliser **BIOFIBRE® Hair Comfort** quotidiennement (ou tous les 2 jours).

Les shampoings trop agressifs ne sont pas adaptés et peuvent provoquer des irritations du cuir chevelu, démangeaisons et desquamations.



7. COMÉDONS

Pour éliminer les petits bouchons de sébum (comédons) qui peuvent se former à la base des cheveux implantés, il est recommandé de nettoyer une fois toutes les deux semaines avec une brosse à dents souple lors de l'application de **BIOFIBRE® Hair Comfort** et de procéder à des mouvements très délicats. Vaporiser **BIOFIBRE® DermaClean** sur la zone implantée 3 à 4 fois par semaine à partir de la 3ème semaine. Il est recommandé de contacter la clinique d'implantologie pour obtenir une démonstration de ce simple procédé.



8. MER ET PISCINE

Laver les cheveux à l'eau douce et avec **BIOFIBRE® Hair Comfort** après chaque baignade en mer ou en piscine.



9. EXPOSITION AU SOLEIL

Éviter les coups de soleil sur le cuir chevelu en vous protégeant avec un couvre-chef propre.



10. SAUNAS

Il est recommandé de rassembler les cheveux dans une serviette propre et humide. Immédiatement après le sauna, rafraîchir la zone implantée.



11. COUVRE-CHEF

L'utilisation d'un couvre-chef n'est pas recommandée. S'il vous est nécessaire d'en porter, il est conseillé de toujours utiliser une protection propre pour éviter le contact direct avec la peau et réduire les risques de frottement sur les cheveux implantés. Il est recommandé de laver la zone implantée avec **BIOFIBRE® Hair Comfort** et de vaporiser **BIOFIBRE® DermaClean**.



12. CONTRÔLE MÉDICAL PÉRIODIQUE

Effectuer les contrôles auprès de la clinique d'implantologie selon votre programme personnalisé ou en cas de démangeaisons/rougeurs/douleurs persistantes.



13. PRODUITS RECOMMANDÉS

Utiliser **BIOFIBRE® Hair Comfort** quotidiennement (ou tous les 2 jours) et **BIOFIBRE® DermaClean** sur la zone implantée 3-4 fois par semaine à partir de la 3ème semaine. À partir de la 5ème semaine, vaporiser **BIOFIBRE® SeboCare** sur la zone d'implantation une fois par semaine, afin d'éviter la formation d'accumulations de sébum. Si nécessaire, contacter la clinique pour plus d'informations.

POUR LE PATIENT ET POUR LE COIFFEUR



14. DIRECTION DES CHEVEUX

Vous pouvez apporter de petites modifications au type de coiffure que vous choisissez. Cependant, les changements de coiffure fréquents ne sont pas recommandés.



15. COUPE

Il est conseillé de garder la longueur des cheveux naturels semblable à celle des cheveux implantés. Chaque coiffeur peut réaliser un simple ajustement de la coupe. Il est conseillé de communiquer vos besoins au coiffeur, pour éviter les coupes non désirées. S'il est nécessaire de couper Biofibre®, utiliser des ciseaux pointus et propres, afin d'éviter de les endommager ou de les boucler.



16. COULEUR

Si vous souhaitez changer la couleur de vos cheveux, utiliser exclusivement des colorants sans ammoniaque ni résorcinol.



17. SÉCHAGE

Séchez les cheveux implantés naturellement ou à l'air tiède.



18. PRODUITS INTERDITS

Il est recommandé d'éviter les produits suivants :

- microfibres de kératine (Toppik, Dermmatch, Biothik, etc),
- teintures capillaires contenant de l'ammoniaque et/ou du résorcinol,
- produits agressifs (laques, lotions, sprays, mousses),
- shampooings ou crèmes au crésol (goudron),
- des shampooings et lotions anti-sébum et antipelliculaires (si non-prescrits par votre médecin),
- utilisation prolongée de substances à base d'iode et de peroxyde d'hydrogène,
- produits contenant plus de 5 % d'essence de citron ou de vinaigre.



19. TRAITEMENTS INTERDITS

Il est recommandé d'éviter les traitements suivants :

- lissage permanent, permanente et décoloration,
- chaleur excessive du sèche-cheveux ou du casque sèche-cheveux (+50°C),
- utilisation d'un fer à lisser et d'un fer à boucler,
- brossage énergique,
- tractions au peigne,
- sauna sans couvre-chef humide



Biofibre®

DANS LE MONDE

Biofibre Implant System®
est pratiqué exclusivement dans des **cliniques
spécialisées** en dermatologie, chirurgie plastique
et médecine esthétique, pour garantir des résultats
optimaux aux patients du monde entier

Timbre du Docteur / Clinique

Mfd. by MEDICAP® srl
High Technology Hair Implant System
Tel. +39.059.692142 - info@biofibre.com
www.biofibre.com

 **Biofibre by Medicap srl**

 **Biofibre**

 **Biofibre**