



AFTER CARE

ALCUNI SEMPLICI
SUGGERIMENTI



CUOIO CAPELLUTO


L'aspetto più importante su cui si basa il mantenimento di Biofibre® è una **buona igiene personale e una corretta manutenzione post impianto.**



Biofibre® Hair Care Set è stato ideato per la corretta manutenzione post impianto. Contiene i prodotti più idonei per l'igiene e il mantenimento di Biofibre®:



BIOFIBRE® Hair Comfort per la pulizia del cuoio capelluto, **BIOFIBRE® DermaClean** per l'igiene del cuoio capelluto, **BIOFIBRE® SeboCare** per la prevenzione di tappi di sebo.

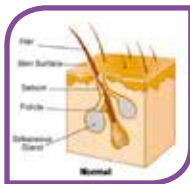

La superficie del cuoio capelluto umano (epidermide) è caratterizzata da un'elevata circolazione sanguigna e dalla produzione di una sostanza oleosa chiamata "sebo". Si tratta di un'utile barriera naturale, ma se prodotto in eccesso, deve essere rimosso. La regola principale per una corretta manutenzione del cuoio capelluto è l'eliminazione dell'eccesso di sebo e di sudore.



PRIMO GIORNO DOPO L'IMPIANTO



Evitare di fare lo shampoo e di pettinare i capelli. Nel caso si indossi un cappello o un copricapo, si prega di proteggere l'area impiantata con garze sterili. Non utilizzare microfibre di cheratina.



Si ricorda di seguire la terapia antibiotica (sistemica e locale) e di assumere cetrizina al bisogno, come prescritto dalla clinica.



In base al numero di capelli impiantati si può notare un arrossamento del cuoio capelluto. Per eliminare questo fenomeno transitorio è sufficiente



Non usare nessun prodotto o effettuare alcun trattamento al di fuori di quelli consigliati dalla clinica d'impianto.

utilizzare una borsa del ghiaccio sulla zona interessata, proteggendo l'area di contatto con garze sterili. Si può ripetere l'applicazione 2 volte al giorno per 5 minuti.



PRIMA SETTIMANA DOPO L'IMPIANTO



Al 3° giorno, utilizzare uno shampoo a base di ketoconazolo. Al 6° giorno, usare **BIOFIBRE® Hair Comfort**.



Trattare i capelli con movimenti delicati in quanto un'eccessiva trazione dei capelli impiantati ne aumenta il rischio di caduta.



Per la notte si consiglia di utilizzare un cuscino morbido e una federa pulita per evitare involontarie trazioni sui capelli.



Per pettinare i capelli Biofibre® utilizzare un pettine a denti larghi, precedentemente disinfettato. Se necessario, prima di pettinare i capelli, trattenere le lunghezze con una mano e districare i nodi.



Evitare l'eccessiva esposizione al sole della zona impiantata e qualsiasi contatto con luoghi polverosi o sporchi (inclusa la spiaggia). Non usare cappelli o copricapi senza aver protetto la zona impiantata con garze sterili.

Non usare casco. Non utilizzare Toppik o altre microfibre di cheratina.



Si ricorda di seguire la terapia antibiotica (sistemica e locale) e di assumere cetrizina al bisogno, come prescritto dalla clinica.



Non usare nessun prodotto o effettuare alcun trattamento al di fuori di quelli consigliati dalla clinica d'impianto.



PRIMO MESE DOPO L'IMPIANTO



A partire dalla 2ª settimana dopo l'impianto, utilizzare **BIOFIBRE® Hair Comfort** ogni 2 o 3 giorni. Utilizzare uno shampoo a base di ketoconazolo una volta alla settimana.



Trattare i capelli con movimenti delicati in quanto un'eccessiva trazione dei capelli impiantati ne aumenta il rischio di caduta.



Si ricorda di completare la terapia locale e la cura del cuoio capelluto utilizzando **BIOFIBRE® DermaClean** secondo quanto prescritto dalla clinica d'impianto.



Evitare l'eccessiva esposizione al sole della zona impiantata e qualsiasi contatto con luoghi polverosi o sporchi (inclusa la spiaggia). Non usare cappelli o copricapi senza aver protetto la zona impiantata con garze sterili. Non usare casco. Non utilizzare Toppik o altre microfibre di cheratina.



Non usare nessun prodotto o effettuare alcun trattamento al di fuori di quelli consigliati dalla clinica d'impianto.



Durante il primo mese evitare o ridurre bevande alcoliche, l'uso di tabacco, gli sforzi fisici e la relativa sudorazione, sauna o solarium, bagni in mare o in piscina. Questo servirà ad accelerare il processo di guarigione dopo l'impianto.

**REGULAR
FOLLOW-UP**

MANUTENZIONE POST IMPIANTO DOPO IL PRIMO MESE



Si consiglia un check-up medico presso la clinica d'impianto per stabilire **un programma personalizzato di manutenzione post impianto**. Ciò permetterà di massimizzare la durata e i risultati estetici ottenuti con l'impianto.



Non usare nessun prodotto o effettuare alcun trattamento al di fuori di quelli consigliati dalla clinica d'impianto.



Utilizzare **BIOFIBRE® Hair Comfort** quotidianamente oppure ogni 2 giorni.



Si ricorda che la vostra clinica d'impianto è a disposizione per fornirvi tutte le informazioni che desiderate. Vi invitiamo ad approfittare di questa opportunità per ottimizzare il risultato ottenuto.



Utilizzare uno shampoo a base di ketoconazolo (tipo Nizoral) da 1 a 4 volte al mese (come suggerito dalla clinica).



Spruzzare **BIOFIBRE® DermaClean** sulla zona impiantata 3-4 volte alla settimana a partire dalla 3^a settimana.



Spruzzare **BIOFIBRE® SeboCare** sulla zona impiantata 3 volte alla settimana a partire dalla 5^a settimana, al fine di evitare la formazione di accumuli di sebo.



Nel corso dei mesi successivi potrebbe comparire un piccolo accumulo di sebo intorno ai capelli impiantati. È quindi necessaria l'eliminazione del sebo in eccesso e dei piccoli tappi di sebo (comedoni) che potrebbero formarsi.



CONSIGLI DA RICORDARE



1. SIATE NATURALI

Si prega di trattare i capelli Biofibre® con naturalezza e mai in modo aggressivo al fine di ottenere il massimo beneficio estetico e la massima durata.



2. NON GRATTARSI

Non grattarsi o toccare la zona impiantata con mani non pulite. Se necessario è possibile utilizzare un pettine a denti larghi disinfettato con **BIOFIBRE® DermaClean**.



3. PETTINARSI

Pettinarsi delicatamente seguendo la direzione dei capelli impiantati. Assicurarci che il pettine (preferibilmente di legno, al fine di ridurre la carica elettrostatica) sia pulito e disinfettato con **BIOFIBRE® DermaClean**.



4. CUSCINO

L'importanza di utilizzare un cuscino morbido e con una federa pulita non deve essere sottovalutata, soprattutto in caso di impianti estesi. I cuscini con una federa in raso o seta garantiscono il minimo attrito e consentono la massima durata del vostro impianto di capelli Biofibre®.



5. SUDORE

Clima caldo ed esercizio fisico aumentano la sudorazione. Per rimuovere la sudorazione eccessiva dal cuoio capelluto, si consiglia di sciacquare con acqua fredda non appena possibile.



6. SHAMPOO

Effettuare movimenti molto delicati durante lo shampoo, per ridurre al minimo le frizioni e il rischio di caduta delle fibre impiantate. Si consiglia l'utilizzo di **BIOFIBRE® Hair Comfort** quotidianamente (oppure ogni 2 giorni).

Shampoo troppo aggressivi non sono una soluzione idonea e possono provocare irritazione del cuoio capelluto, prurito e desquamazione.



7. COMEDONI

Per rimuovere i piccoli tappi di sebo (comedoni) che possono formarsi alla base del capello impiantato, si consiglia di effettuare una pulizia una volta ogni due settimane con uno spazzolino morbido durante l'applicazione di **BIOFIBRE® Hair Comfort** e procedere con movimenti molto delicati. Spruzzare **BIOFIBRE® DermaClean** sulla zona impiantata 3-4 volte alla settimana a partire dalla 3ª settimana. Si prega di contattare la clinica d'impianto per ottenere una dimostrazione di questo semplice procedimento.



8. MARE E PISCINA

Lavare i capelli con acqua dolce e **BIOFIBRE® Hair Comfort** dopo ogni bagno in mare o in piscina.



9. ESPOSIZIONE AL SOLE

Evitare le scottature sul cuoio capelluto proteggendosi con copricapi puliti.



10. SAUNA

Si raccomanda di raccogliere i capelli con un asciugamano pulito e inumidito. Immediatamente dopo la sauna, rinfrescare la zona di impianto.



11. COPRICAPI

L'uso di copricapi è sconsigliato. Se necessario indossarli, si consiglia di usare sempre una protezione pulita per evitare il contatto diretto con la cute e ridurre il rischio di frizione sui capelli impiantati. Si consiglia di lavare con **BIOFIBRE® Hair Comfort** e vaporizzare **BIOFIBRE® DermaClean**.



12. CONTROLLO MEDICO PERIODICO

Eseguire i controlli presso la clinica d'impianto secondo il vostro programma personalizzato o in caso di prurito/arrossamento/dolore persistente.



13. PRODOTTI RACCOMANDATI

Utilizzare **BIOFIBRE® Hair Comfort** quotidianamente (oppure ogni 2 giorni) e **BIOFIBRE® DermaClean** sulla zona impiantata 3-4 volte alla settimana a partire dalla 3ª settimana. Vaporizzare **BIOFIBRE® SeboCare** sulla zona di impianto una volta alla settimana a partire dalla 5ª settimana, al fine di evitare la formazione di accumuli di sebo. Se necessario, contattare la clinica per ulteriori informazioni.

PER IL PAZIENTE E PER L'ACCONCIATORE



14. DIREZIONE DEI CAPELLI

È possibile apportare piccole modifiche al tipo di pettinatura scelto. Si sconsiglia tuttavia di effettuare frequenti cambi di pettinatura.



15. TAGLIO

Si consiglia di mantenere una lunghezza dei capelli naturali conforme a quella dei capelli impiantati. Ogni parrucchiere è in grado di effettuare una semplice regolazione del taglio. Si consiglia di comunicare le vostre esigenze al parrucchiere, per evitare tagli indesiderati. Nel caso in cui fosse necessario tagliare Biofibre®, utilizzare forbici affilate e pulite, per evitare danni o arricciamenti.



16. COLORE

In caso desideriate cambiare il colore dei capelli, vi preghiamo di utilizzare solo coloranti senza ammoniaca e resorcinolo.



17. ASCIUGATURA

Asciugare i capelli impiantati naturalmente o con aria tiepida.



18. PRODOTTI VIETATI

Si raccomanda di evitare i seguenti prodotti:

- microfibre di cheratina,
- tinture per capelli contenenti ammoniaca e/o resorcinolo,
- prodotti aggressivi (lacche, lozioni, spray, schiume),
- shampoo o creme con cresolo (catrame),
- shampoo e lozioni anti-sebo e anti-forfora (se non prescritti dal medico),
- uso prolungato di sostanze a base di iodio e acqua ossigenata,
- prodotti contenenti essenza di limone o aceto superiore al 5%.



19. TRATTAMENTI VIETATI

Si raccomanda di evitare i seguenti trattamenti:

- lisciatura permanente, permanente e decolorazioni,
- calore eccessivo del phon o del casco asciugacapelli (+50°C),
- uso di piastra stiracapelli e ferro arricciacapelli,
- spazzolature energiche,
- trazioni col pettine,
- sauna senza copricapo bagnato.



NEL MONDO

Biofibre Implant System®

è praticato esclusivamente in **cliniche specializzate** in dermatologia, chirurgia plastica e medicina estetica, per assicurare risultati ottimali ai pazienti di tutto il mondo

Timbro Dottore / Clinica

Mfd. by MEDICAP® srl
High Technology Hair Implant System

Tel. +39.059.692142 - info@biofibre.com
www.biofibre.com

 **Biofibre by Medicap srl**

 **Biofibre**

 **Biofibre**